

# Instruktion för HPV-prov

## Förbered




Märk provtagningsröret med medföljande personlig etikett




Tvätta händerna. Öppna förpackningen. Håll i delen som inte är täckt med bomull.

## Provtagning

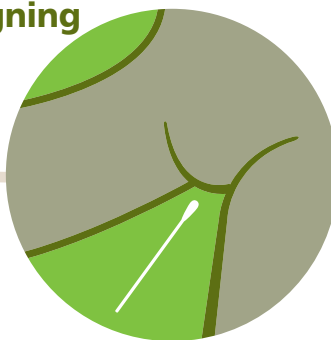

För in provtagningspinnen cirka fem centimeter i slidan.

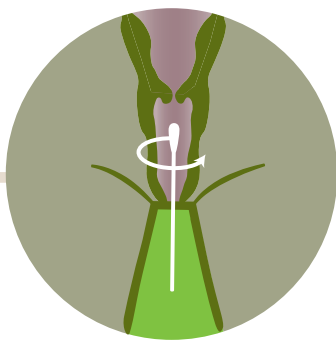

Rotera pinnen mot slidväggarna cirka tre varv.



Öppna provtagningsröret.



För ner provstickan och bryt av den vid den svarta markeringen.



Stäng provtagningsröret.

## Skicka in



Lägg provtagningsröret i bifogad hygienpåse.



Lägg hygienpåsen i bifogat svarskuvert.

### Checklista

- ☐ Jag har märkt provtagningsröret med medföljande personlig etikett
- ☐ Provtagningsröret ligger i hygienpåsen
- ☐ Lägg i brevlådan på en gång!

Om du har mens eller flytningar ska du ta provet ändå.



Posta provet så snart som möjligt.